

endolite
управляй движением



endolite
управляй движением

www.endolite.ru

Откройте для себя свой стиль бега заново

Пример: ВХТАГ 3 S F

Выбрано: Стопа Блэйд ХТ,
набор пружин стопы 3,
спортивная подошва,
проксимальный адаптер
под пирамидку

ВХТАГ **3** **S** **F**

Набор пружин стопы

Спортивная подошва

Тип проксимального адаптера:
M - пирамидка
F - под пирамидку

Максимальный вес пользователя:	166 кг
Уровень двигательной активности:	3-4
Диапазон жесткости пружин стопы:	1-9
Вес изделия:	850 г
Высота изделия:	250 мм (под пирамидку) 230 мм (пирамидка)
Высота подъема каблука:	10 мм

При заказе стопы пользуйтесь таблицей подбора пружин стопы.




Таблица подбора пружин стопы

Пользователь	Вес пользователя в кг										Набор пружин стопы
	44-52	53-59	60-68	69-77	78-88	89-100	101-116	117-130	131-147	148-166	
Без трусцой	1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	Набор пружин стопы
Без	2	3	4	5	6	7	9	9	9		


Без трусцой Эпизодический бег трусцой
Без Регулярные забеги на большие дистанции и тренировки на выносливость

Не допускается использование стопы для спортивных занятий, допускающих удары ногами (футбол, регби и т. д.). Важно: Для самых активных пользователей не допускается превышения ограничений по весу, указанных в таблице для всех типов пружин стопы.

Адаптер под пирамидку

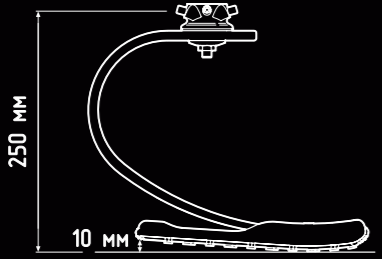

Адаптер пирамидка

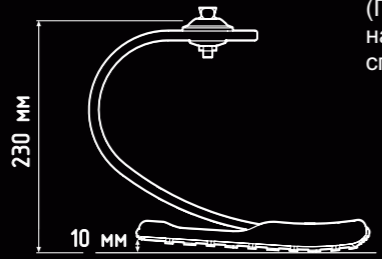

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
на стопу Blade XT - 12 месяцев
(Гарантия не распространяется на изменение окраски стопы и спортивную подошву стопы)



www.endolite.ru

Blade XT

Жизненный стиль Блэйд ХТ



Технология - это составляющая часть удовольствия, получаемого нами от ведения активного образа жизни. Стопы Endolite Blade XT отличаются ее плавные линии. Такая конструкция открывает перед вами массу новых возможностей: возможность хорошо выглядеть, упорно тренироваться и воплотить ваши стремления почувствовать что-то новое. Это очень интересная часть снаряжения, которая позволит вам любить ваш спорт и добиваться новых достижений.

Естественная элегантность

Захватывающие впечатления

«Использование BladeXT изначально уменьшило мое время на 5 километровой дистанции забега на 2 минуты 20 секунд. Быстрее всего я бежал на Парадутлоне *ITU во Франции. Он начался с забега на 5 км, который я пробежал за 19 минут 45 секунд. В этом году моя цель пробежать за 19 минут. В долгосрочной перспективе нет никаких ограничений с точки зрения времени... Я думаю с помощью Blade XT все это вполне возможно, это лишь вопрос тренировок, движения вперед и изучения биомеханики протеза, а также того, как его использовать. Я все еще учусь! Наиважнейшей целью все еще является войти в паралимпийскую команду в 2016 году! Я люблю состязаться в скорости!»

Адриан Хитилд

*ITU = Международный союз триатлона



Технология Блэйд ХТ

Контакт и реакция

Тракторная Пятка (traction heel™) Blade XT работает как несущая пружина, которая поддерживает естественное биомеханическое положение тела и обеспечивает движение вперед. Сразу же после контакта с опорной поверхностью, пятка активно участвует в толчке вперед, обеспечивая сгибание колена и предотвращая «переразгибание» конечности. Моментальная реакция работающей совместно с пяткой раздвоенная карбоновая пластина переднего отдела стопы обеспечивает превосходную эффективность бега.



Ускорение

Раздвоенная карбоновая пластина переднего отдела стопы в виде буквы «С» с удлиненной опорой сочетает низкий вес с оптимизированной реакцией пружины на любых скоростях. Превосходное ощущение опоры, достигнутое за счет использования Тракторной Пятки™, обеспечивает быстрый и при этом безопасный бег по наклонным поверхностям и пересеченной местности. Контроль необходимого торможения во время смены направления или в конце забега, обеспечивается поддерживающей корпус пяткой.

Спортивная оптимизация

Ваш любимый вид спорта может включать в себя состязания в скорости, тренировки с ракеткой, битой, и их различные сочетания. И независимо от того, какие перед вами стоят цели по поддержанию спортивной формы, ваш результат, конечно же, будет включать в себя получение бесконечного удовольствия, лишеного какого-либо дискомфорта или повреждений. Endolite Blade XT имеет оптимизированные для спортивных состязаний передний отдел стопы и пятки, которые обеспечивают безопасность положения тела даже при экстремальном маневрировании, и очень настойчиво возвращает вас в спортзал или на беговую дорожку, без необходимости смены протеза!

Биометрическое управление конечностью

Физиология стопы позволяет поддерживать надежное сцепление с опорной поверхностью, заставляя ваши мышцы работать, эффективно сохраняя сбалансированное положение тела. Удлиненный передний отдел стопы в сочетании со схемой сжатия пружины дает в результате более мощное движение вперед, достигаемое за счет высвобождения энергии. Конструкция Blade XT усиливает естественное движение при беге, уменьшая нагрузку на спину и плечи.

Клинические преимущества

Blade XT оснащен соединительной скользящей пирамидой A/P, которая позволяет техникам-протезистам осуществлять моментальный и полный контроль над всеми возможностями юстировки, оптимизируя стопу для достижения наилучших результатов. Компенсация сокращения длины конечности при установке требует дополнительных 10-15 мм, которые позволят сохранить биомеханическую симметричную высоту. Удлиненные опоры переднего отдела стопы поддержат положение тела при занятиях самой разнообразной деятельностью.

Вдохновение

Очертания Blade XT и его превосходное лакокрасочное покрытие стали частью вдохновения, которое заставляет пользователей приложить все усилия для того, чтобы перейти на новый уровень в любимом виде спорта. Эта технология как раз из тех, которые вызывают возглас «Вот это да!» в спортивных состязаниях и на тренировках, делая занятия спортом еще более вдохновенными!

