

Сравнение различных гелевых материалов для изготовления протезных креплений и чехлов

ALPS Gel



EasyGel

Мягкая зернистая текстура

Содержит антиоксиданты, которые эффективно поглощают свободные радикалы и гидроксильные группы.

Лучше всего подходит для пользователей имеющих шрамы, раздражения и кожных покровов и для чувствительной кожи.




GripGel

Гладкая липкая текстура

Эффект легкой липкости исключает возможность образования складок материала в подколенной области, и таким образом не ограничивает движение при сгибании в колене

Лучше всего подходит для пользователей со здоровой кожей культи

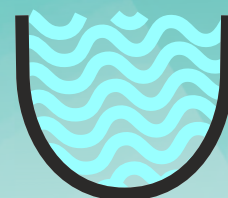

(HD) Gel

Плотная устойчивая текстура

Относительно жесткая структура дает возможность пользователям с высоким уровнем двигательной активности иметь повышенную управляемость и обратную связь с протезной системой.

Лучше всего подходит для пользователей переходящих с силиконовых чехлов на гелевые.



Изготовлено в США



Представительство в России
ООО "Компания ВИТА-ОРТА",
141011, Россия, Московская Область,
г. Мытищи, ул. Октябрьская, д. 10
тел./факс: +7 (495) 103 4004
E-mail: sales@vitaorta.ru