

Аквапротезы голени и бедра aqualimb

Уникальные протезные системы
быстрой сборки для принятия водных
процедур

Протезные влагостойкие системы Aqualimb позволяют
безопасно принимать водные процедуры и ходить по мокрым
и скользким поверхностям.



www.eprodolite.ru




Аквапротез бедра: - Аqualimb TF



Аквапротез голени: - Аqualimb TT

Аквипротез голени: - Aqualimb^{TT}

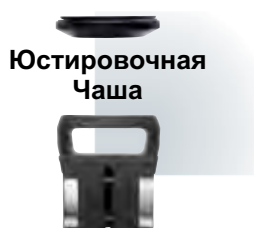

Отформованная косметическая оболочка голени для получения естественного вида протезной системы.

Аквипротез голени: - Aqualimb^{TT}


Максимальный вес пользователя: 100кг
 Уровень двигательной активности: 1-2
 Размерный ряд: 22см-27см
 Вес изделия: 1.39кг
 Высота конструкции: от 280 до 415мм

Высота подъема каблука: 5мм
 Гарантийные обязательства: 24 месяца

100кг Шифр изделия:

Размер	Левая	Правая
22см	629705L	629706L
23см	629707L	629708L
24см	629709L	629710L
25см	629711L	629712L
26см	629713L	629714L
27см	629715L	629716L

¹Указанный вес соответствует весу Аквипротеза голени размером 24см

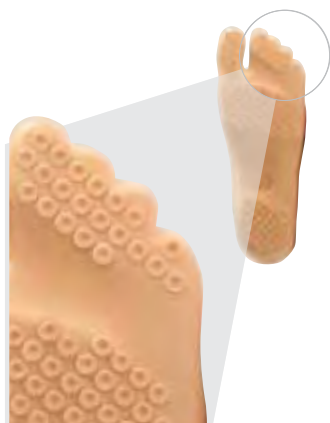

Стопа Аквипротеза голени имеет множество миниатюрных присосок, благодаря которым протез буквально «прилипает» к скользким мокрым поверхностям, тем самым предохраняя пользователя от проскальзывания.

Аквипротез голени разработан для всех пользователей, которые желают принимать водные процедуры, и только с уровнем двигательной активности 2.



Аквипротез бедра: - Aqualimb^{TF}

Пример заказа



25L
 Размер/Сторона
 R - правая
 L - левая

Выбран Аквипротез бедра,
 размер стопы 25 см, левая

Максимальный вес пользователя: 100кг
 Уровень двигательной активности: 2

Размерный ряд: 22см-27см
 Вес изделия: 2.0 кг²
 Высота конструкции: 400-585мм
 Высота подъема каблука: 5мм
 Гарантийные обязательства: 24 месяца

²Указанный вес соответствует весу Аквипротеза бедра размером 24см



КОРОЛЕВСКАЯ НАГРАДА
 ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
 ЗА ИННОВАЦИОННЫЕ
 РЕШЕНИЯ
 2019



Клинический сервис: ООО «Эндолайт Центр»
 141011, Россия, Московская обл., г. Мытищи, Октябрьская ул., д. 12
 Тел.: +7 495 787 5279; Тел./Факс: +7 495 787 5280; E-mail: sales@endolite.ru; Web: www.endolite.ru

Поставка комплектующих: ООО «Компания ВИТА-ОРТА»
 141011, Россия, Московская обл., г. Мытищи, Октябрьская ул., д. 10
 Тел./Факс: +7 495 103 4004; e-mail: sales@vitaorta.ru; web: www.vitaorta.ru

Аквипротез бедра: - Aqualimb^{TF}



Аквипротез бедра оснащен модульным полицентрическим коленным механизмом с высокой степенью устойчивости и ручным коленным замком, который при необходимости легко может быть активирован по желанию пользователя.

Комплект Аквипротеза бедра не требует дополнительных адаптеров и имеет легко собирающуюся конструкцию с вырезом и сдвигающимся по направляющей корпусом для возможности регулировки длины протезной системы, а также сферический проксимальный адаптер для получения у пользователя оптимальной походки.