




Blade^{XT}

Полноценное решение
для спортивного образа жизни.

Blatchford



« Стона BladeXT
открыла для меня
новые возможности.
Она идеальна. Теперь
бег по пересеченной
местности для меня не
проблема!
Преодоление холмов,
спуск и подъем по
лестнице, бег - теперь
я могу все это! »

Евгений

BladeXT

Стопа BladeXT - это полноценно решение для активных пользователей. Она одинаково подходит как для повседневного использования, так и для бега, велоспорта и других спортивных мероприятий. Конструкция стопы была разработана таким образом, чтобы пользователю не требовалась ее замена для выполнения различных действий в течении дня.

Стопа BladeXT имеет небольшой вес, высокую прочность, и прекрасно адаптируется под опорную поверхность. Комфортная носка и отсутствие нежелательных воздействий на опорно-двигательный аппарат достигаются за счет применения в конструкции спаренных пружин мыска и тракционной пятки, а также основной С-образной пружины, обеспечивающей оптимальную рекуперацию энергии.

В результате стопа BladeXT предлагает своим пользователям универсальность, высокую безопасность и уверенность, необходимые для полного наслаждения активной жизнью.



Оптимальная рекуперация энергии и управляемое ускорение

Пружина мыска стопы обеспечивает поглощение удара и рекуперацию энергии при отрыве стопы от опорной поверхности. При первоначальном соприкосновении стопы с опорной поверхностью C-образная пружина сжимается и накапливает энергию, необходимую для последующего шага пользователя.

Устойчивость и безопасность

Благодаря уникальной конструкции мыска и пятки стопы, пользователи чувствуют себя устойчиво и безопасно вне зависимости от того стоят ли они, бегают или меняют направление движения. Интегрированная тракционная подошва помогает обеспечить безопасность и устойчивость для всех двигательной активности.

Защита и адаптация к опорной поверхности

Уникальная конструкция стопы обеспечивает превосходную амортизацию вертикальной осевой нагрузки и обеспечивает высокий уровень комфорта и защиты, что делает ее идеальным решением для активных пользователей. Расщепленный мысок стопы улучшает адаптацию к опорной поверхности, обеспечивает гибкость и повышает комфорт на неровных поверхностях. Конструкция стопы BladeXT подчеркивает естественное движение, снижает нагрузку на опорно-двигательный аппарат.

Легкость и высокая прочность

Легкая и прочная конструкция стопы BladeXT не будет отягощать вас. Изготовленные из композиционного углеволокна пружины стопы имеют высокую прочность, гибкость и превосходную реакцию на изменение типа опорной поверхности.

Влагозащищенность


Вы случайно наступили в лужу или попали в грязь? Никаких проблем! После эксплуатации в абразивной, грязной среде или после воздействия морской или хлорированной воды просто как следует промойте стопу BladeXT проточной пресной водой и высушите.

Blade^{XT}



Ключевые особенности

- Спаренные пружины мыска и пятки стопы
- Расщепленная конструкция пружины мыска
- Тракционная пружина пятки
- Пяточный клин, для изменения жесткости пятки
- Влагозащищенная конструкция IP67
- Заменяемый комплект пружин стопы

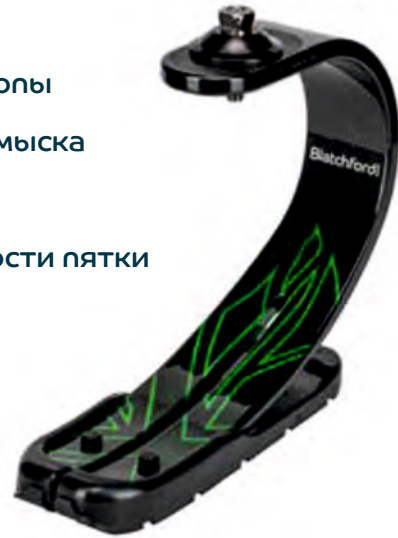

Спецификация

Максимальный вес пользователя:	166 кг
Уровень двигательной активности:	4
Диапазон пружин:	1-9
Вес изделия:	850 г (с пружиной категории жест. 6)
Сборочные размеры:	250 мм (адаптер под пирамидку) 230 мм (адаптер-пирамидка)



Допускается погружение изделия в пресную воду на глубину до 1м.
Допускается всепогодная эксплуатация

Пример заказа

Шифр изделия	Набор пружин стопы	Спортивная подошва	Тип адаптера: F - под пирамидку M - пирамидка
BXTAG	3	S	F



Выбрано: Stona BladeXT, коэффициент жесткости набора пружин стопы 3, спортивная подошва, проксимальный адаптер под пирамидку

Шифр изделия	Набор пружин стопы	Спортивная подошва	Тип адаптера: F - под пирамидку M - пирамидка
BXTAG	4	S	M

Выбрано: Stona BladeXT, коэффициент жесткости набора пружин стопы 4, спортивная подошва, проксимальный адаптер-пирамидка

Бег трусцой	Эпизодический или частый оздоровительный бег	Пользователь	Уровень двигательной активности	Вес пользователя											кг фунтов
Бег	Регулярные забеги на большие дистанции и тренировки на выносливость			44-52	53-59	60-68	69-77	78-88	89-100	101-116	117-130	131-147	148-166		
Важное замечание:	Для пользователей с высоким уровнем вертикального ударного воздействия при подборе индивидуальных пружин превышение ограничения по максимальному весу недопустимо.	Бег трусцой	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	Набор пружин стопы	
		Бег	4	2	3	4	5	6	7	8	9	9	-		

Сборочные Размеры

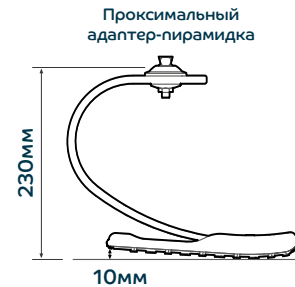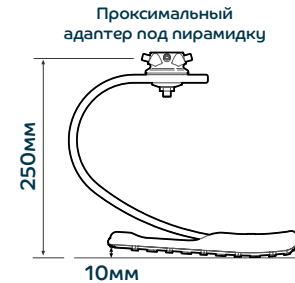





Проксимальные Адаптеры

Проксимальный адаптер-пирамидка	189427
Проксимальный адаптер под пирамидку	189527

Заменяемые комплекты пружин стопы

1,2 (мягкие)	539083SS
3, 4, 5 (средней жесткости)	539083MS
6, 7 (жесткие)	539083FS

Следуй за нами:

-  www.youtube.com/user/ENDOLITERUS
-  www.facebook.com/EndoliteRussia
-  www.vk.com/endoliterussia
-  www.pinterest.ru/BlatchfordRus/
-  www.instagram.com/endoliterussia/

endolite.ru



ИМ 13

Рекомендуется проведение ежегодного технического обслуживания изделий. При техническом обслуживании необходим визуальный осмотр на наличие дефектов, которые могут нарушать функциональность изделия. К обслуживанию допускается только персонал, прошедший обучение в учебных центрах Blatchford и имеющий специальный сертификат. Перед выполнением каких-либо новых действий в повседневной жизни, пожалуйста, уточните у своего протезиста о необходимости проведения специального обучения.

+44 (0) 1256 316600 | customer.service@blatchford.co.uk
Blatchford Products Limited, Unit D Antura,
Kingsland Business Park,

Blatchford

Endolite Россия
ООО «Эндолайт Центр» (клинический сервис)
141011, Россия, Московская обл., г. Мытищи, Октябрьская ул., дом 12
Тел.: +7 (495) 787 5279, Факс: +7 (495) 787 5280,
E-mail: sales@endolite.ru, Web: www.endolite.ru

ООО «Компания Вита-Орта» (поставка комплектующих)
141011, Россия, Московская обл., г. Мытищи, Октябрьская ул., дом 10
Тел./Факс: +7 (495) 103 4004,
E-mail: sales@vitaorta.ru, Web: www.vitaorta.ru