

Силиконовые протезные чехлы «Comfort»



Технология воплощения комфорта

Blatchford

Протезные чехлы «Comfort»

Увеличивающаяся сложность протезных систем приводит к тому, что требования к протезным чехлам становятся более критичными для достижения успешного протезирования. Комфорт в носке, возможность управления протезом играют все более значимую роль для пользователя протезной системой. Blatchford разработал бесшовную технологию изготовления протезных чехлов, увеличив взаимодействие чехла с культей пользователя, и обеспечив своим пользователям надежность и комфорт в носке.

Чехлы Blatchford Comfort предохраняют чувствительную кожу культы и ее проблемные области от воздействия стригущих усилий и чрезмерных нагрузок. Тканевое покрытие с интегрированной матрицей отлично стыкуется с культей, а зоны эластичности позволяют без проблем гнать конечность в колене, и в тоже время чехол осуществляет надежное крепление протеза, не позволяя ему сползать с культы.

Две модификации чехлов: Comfort Смягчающий и Comfort Замковый, позволяют сделать идеальный выбор для каждого конкретного пользователя.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Удлиненный чехол

Чехлы «Comfort» от Blatchford имеют длину 485 мм, и дают дополнительные возможности для протезирования при длинной культе голени.

Интегрированная матрица

Машинная вязка внешнего тканевого покрытия Замкового чехла интегрирована в дистальную матрицу с растяжением по окружности для исключения поршневого эффекта.

Бесшовная технология чехла позволяет получить плавный переход между двунаправленной зоной растяжения и зоной растяжения по окружности.

Гибкое дистальное крепление (для замковых чехлов)

Уникальной особенностью замкового чехла «Comfort» является применение сверхгибкого зонтика, который легко выворачивается наизнанку при надевании чехла.




Эластичные зоны

Проксимальная зона двунаправленного растяжения придает комфорт в носке, снижает стригущие воздействия, возникающие при сгибании в колене.

Финишное силиконовое покрытие Endresse™

Применение финишного силикона Tendresse™ позволяет снизить стригущие нагрузки на кожные покровы культы, поскольку данный материал имеет коэффициент трения на 78% меньше, чем у стандартного силикона.

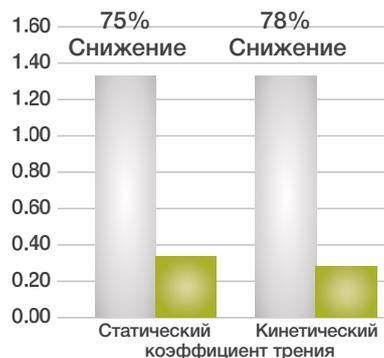

■ = Стандартный силикон
■ = Финишный силикон Endresse™



ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБОРУ ЧЕХЛА

Уровень ампутации: Голень

Уровень двигательной активности: 2-3


Размерный ряд: 22, 23.5, 25, 26.5, 28, 30, 32, 34, 36, 40

Пример заказа:

Чехол Comfort смягчающий **СТТСРXXL**

Чехол Comfort замковый **СТТЛРXXL**

C	ТТ	C	P	XX	L	*Замечание: 23.5 = 23 26.5 = 26
Чехол Comfort	Голенной	C - смягчающий L - замковый	Цилиндрический	Размер с 22см по 40 см*	Светлый цветовой тон	

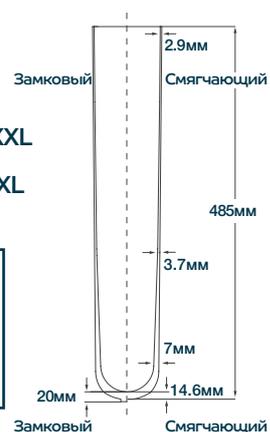

ИЗМЕРЕНИЯ

Для определения размера чехла измеряют окружность культи в 4 см от дистального конца. Для обеспечения надежной посадки из двух подходящих размеров следует выбрать наименьший.



ТЕХНОЛОГИЯ СНЯТИЯ СЛЕПКА И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ГИЛЬЗЫ

Пожалуйста, обратитесь на наш сайт для получения информации и видео о том, как изготовить гильзу для совместного использования с чехлами Blatchford. Для получения отличного результата в изготовлении протезной системы рекомендуем использовать замковые устройства, вакуумные клапаны и сопутствующие аксессуары от Blatchford.

Blatchford

Клинический сервис - ООО «Эндолайт Центр»

141011, Россия, Московская обл., г. Мытищи, Октябрьская ул., д. 12
Тел.: +7 (495) 787 5279; Тел./Факс: +7 (495) 787 5280; E-mail: sales@endolite.ru

Поставка комплектующих - ООО «Компания Вита-Орта»

141011, Россия, Московская обл., г. Мытищи, Октябрьская ул., д. 10
Тел./Факс: +7 (495) 103 4004; E-mail: sales@vitaorta.ru

Chas A Blatchford & Sons Ltd, Unit D, Antura, Kingsland Business Park, Basingstoke, RG24 8PZ, United Kingdom
Tel: +44 (0) 1256 316600, Fax: +44 (0) 1256 316710, E-mail: sales@blatchford.co.uk